

SARA PLUS

El avanzado bipedestador
con elevación

ARJOHUNTLEIGH



...with people in mind

SEGURIDAD, MOVILIZACIÓN,
ENTRENAMIENTO ...



... AMPLIOS BENEFICIOS DEL CÍRCULO DE CONFORT



SARA Plus se une a SARA 3000 como una avanzada adición a la familia de bipedestadores de ArjoHuntleigh.

Activando la movilidad durante las transferencias

SARA Plus es un bipedestador con elevación ergonómico que moviliza a los residentes durante actividades diarias tales como transferencias y visitas al WC.

No obstante, SARA Plus ofrece algo adicional. Extiende los beneficios que activan la movilidad del bipedestador con elevación a más residentes que nunca con anterioridad. La clave es el apoyo adicional que le brinda al residente el Círculo de Confort, formado por el Arc-Rest así como por un sling seleccionado para satisfacer las necesidades individuales. El singular Arc-Rest forma parte integral del mecanismo elevador que ofrece excelente apoyo a la parte superior del cuerpo durante el levantamiento. Otra singular característica del acolchado Pro-Active, un apoyo de rodilla de altura regulable, es una mejor transición a la posición erguida al permitir la flexión natural del tobillo.

Con sus singulares características, SARA Plus incrementa y amplía los beneficios que pueden obtenerse utilizando un bipedestador con elevación, y contribuirá a mejorar, no sólo la calidad del cuidado sino también la de las vidas diarias de los residentes.

Mejorando la movilidad a través de ejercicios

SARA Plus también ofrece algo extra en el área de ejercicios. Es el único bipedestador con elevación diseñado para ejercicios de balanceo, caminar y pasos en rehabilitación. El Círculo de Confort brinda el apoyo necesario al residente. Simplemente se retira el apoyapiés y el acolchado Pro-Active, y SARA Plus se convierte en una excelente plataforma para sesiones de ejercicios. Este aspecto de entrenamiento aporta a SARA Plus una función incluso más valiosa en los entornos de cuidado para mejorar la movilidad de los residentes.

Selección de slings

El sling forma parte integral del Círculo de Confort y se ofrece una amplia selección de ellos para satisfacer necesidades específicas. Además del sling bipedestador básico, hay un sling BOS/EPS especial que permite al residente mantenerse en una posición más erguida, más favorable para la rehabilitación. El sling para transferencias/caminar brinda apoyo a residentes que deben ser transferidos sentados, y también resulta ideal para ejercicios de caminar.



Un solo cuidador puede realizar transferencias, de manera segura y eficaz.



El soporte de una posición de pie más erguida hace que el sling BOS/EPS sea ideal para ejercicios de rehabilitación.



El apoyapiés brinda seguridad y estabilidad, mientras que el acolchado Pro-Active permite flexionar el tobillo de manera natural.



El Arc-Rest ofrece excelente soporte y promueve una sensación de seguridad.

Principales características

- El Arc-Rest brinda excepcional apoyo y confort.
- Carga máxima de seguridad: 190 Kg
- Diseñado para brindar equilibrio y ejercicios de caminar y dar pasos.
- Apoyapiés desmontable y acolchado Pro-Active que permiten efectuar ejercicios de caminar.
- Ruedas de baja fricción con frenos en las dos traseras.

Beneficios para el residente

- Movilidad activada durante las transferencias diarias
- Permite realizar ejercicios de caminar y dar pasos, los cuales mejoran la movilidad.
- Brinda un entorno de trabajo seguro y cómodo.
- Hay disponibles varias versiones de sling (slings bipedestador, de transferencia/caminar BOS/ EPS y de tipo limpiable).

Beneficios para el cuidador

- Una máquina fácil de manejar que reduce la tensión
- Un solo cuidador es capaz de supervisar con seguridad un ejercicio de transferencia o caminar.
- El mando de control significa que el cuidador siempre puede trabajar cerca del residente.
- Los controles dobles ofrecen una alternativa o un sustituto al mando de control.




Para las transferencias, el chasis motorizado puede abrirse para acceso óptimo.



Controles dobles. ¿Mando de control o panel de control en másfil? El cuidador puede seleccionar el medio de control más conveniente de acuerdo con su situación determinada.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Requerimientos de espacio

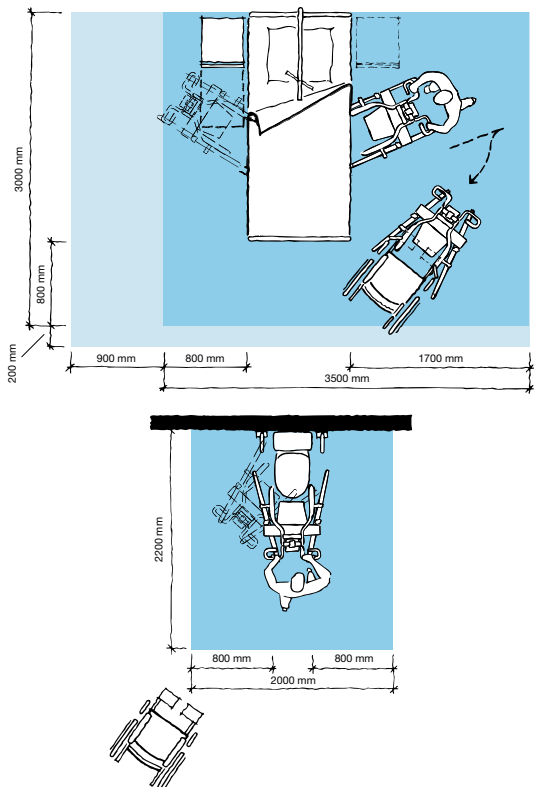

- El área azul indica la superficie de trabajo mínima para que el personal pueda utilizar las ayudas mecánicas de manera ergonómica desde un lado de la cama.
- El área azul claro indica la extensión de superficie de trabajo requerida para facilitar las tareas desde ambos lados de la cama a fin de ofrecer acceso adecuado para el residente, la ayuda mecánica y el cuidador.

Mobility Gallery

Apto para Carl y Doris*



C Carl Permanece en sillas de ruedas y puede sostenerse en pie por sí mismo durante cortos espacios de tiempo

D Doris*, no es capaz de sostenerse por sí misma

Si desea más información sobre Mobility Gallery™ (Galería de movilidad), por favor póngase en contacto con ArjoHuntleigh.

* Con el singular soporte del sling EPS/BOS es factible una elevación y transferencia.

Información del producto

Carga máxima de seguridad	190 kg
Capacidad de báscula	140 kg
Peso	85 kg
Peso con báscula	95 kg
Longitud total	1033 mm
Mínima altura de levantamiento	906 mm
Máxima altura de levantamiento	1497 mm
Altura total	1195 mm
Altura de chasis	116 mm
Anchura externa con patas cerradas	646 mm
Anchura interna con patas abiertas	1002 mm
Ruedas orientables de baja fricción; las dos traseras con frenos	
Batería	24V 5Ah
Con cada SARA Plus se incluyen dos (2) baterías y un (1) cargador	
Clase de protección	Grúa IPX4 Control de mano IP67

Indicador de Descarga de Batería (BDI) – Visualiza la energía remanente e indica cuándo es necesario recargar la batería

Medidor de servicio – Visualiza el tiempo total de uso

Parada de emergencia y neutralización por fallo del sistema

Opcional

Báscula integrada

Accesorios

Asiento de WC

Apoyapiés estrecho

Apoyapiés

Rodillera ancha

Funda de borreguillo para rodillera

Correas de brazos

Correas de piernas

Aprobaciones

El producto está conforme con la legislación actual y todas las normas de producto aplicables.

Únicamente piezas diseñadas ArjoHuntleigh, las cuales son diseñadas específicamente para el propósito, deberían ser usadas en los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh. Como nuestra política es de desarrollo continuo nos reservamos el derecho de modificar diseños y datos específicos sin previo aviso.

ArjoHuntleigh, Sara 3000, Sara Plus y Galería de Movilidad son marcas registradas pertenecientes al grupo ArjoHuntleigh.
© Arjo AB, 2008.

ARJOHUNTLEIGH

...with people in mind.

ArjoHuntleigh Ibérica

Teléf.: 902 430 702

Fax: 902 300 191

E-mail: info@ArjoHuntleigh.es

www.ArjoHuntleigh.es

MIEMBRO DEL GRUPO GETINGE